



Aplicadores WTA

www.wtavet.com.br

Aplicadores - WTA

WTA - Guns




Para prolongar a vida útil deste produto leia e siga atentamente as instruções contidas neste folheto.



Alerta para instruções importantes de funcionamento.

Para informações adicionais ou esclarecer dúvidas, entre em contato com o nosso departamento de assistência técnica por e-mail ou telefone.

Atendimento de segunda à sexta-feira das 7:30 às 17:00h

Telefones: (16) 3951-8161/  (16) 98111- 0067

e-mail: sac@wtavet.com.br

Assistência Técnica  (34) 99293-0034

©WTA – Watanabe Tecnologia Aplicada Eireli - EPP - Todos os direitos reservados.

APRESENTAÇÃO

Parabéns pela escolha. Você acaba de adquirir um produto WTA, marca que agrega qualidade e tecnologia no que fabrica.

A WTA é uma empresa brasileira especializada em soluções para reprodução animal. Nossos produtos são desenvolvidos para o trabalho com bovinos, ovinos e equinos, com reconhecida aprovação pelos mais renomados especialistas do mundo.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Os Aplicadores WTA são indicados para a inseminação artificial. Possuem travamento rápido e automático da bainha. São fabricados em aço inox com acabamento em alumínio ou ABS. São fáceis de usar, desmontar e limpar. Proporcionam praticidade, segurança e higiene para o trabalho profissional.

UTILIZAÇÃO

Insira a bainha completamente até o final - ouvir um “click”. Antes de usar verifique se o travamento foi bem sucedido. Para remover a bainha pressione o “gatilho de liberação” e retire-a completamente.

LIMPEZA


Utilize etanol 70% ou solução com água e detergente neutro para a higienização dos componentes plásticos e metálicos. Não use água fervente (pode empenar a haste ou deformar o corpo do dispositivo).



Eventualmente restos de polímeros das bainhas podem se acumular no interior do corpo e dificultar o travamento da bainha. Para limpar o interior do dispositivo, desenrosque a seção posterior e retire os resíduos. (cuidado para não danificar a mola ou perder a arruela interna).

Proceda a abertura do dispositivo somente quando necessário para evitar o desgaste prematuro das roscas.

Conserve o dispositivo na horizontal e evite sobrepor objetos pesados a fim de preservar suas características.

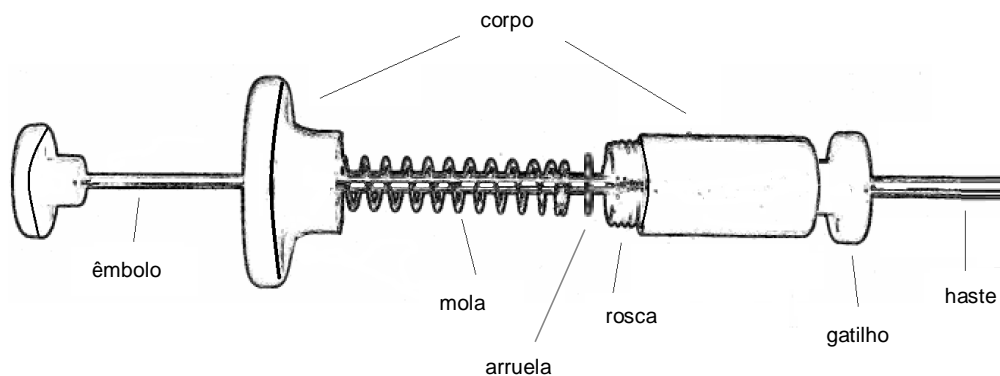

GARANTIA

A WTA – Watanabe Tecnologia Aplicada Eireli - EPP segue rigorosas normas internas de controle da qualidade na fabricação de seus produtos. Além da garantia legal de 90 (noventa) dias, prevista no Código de Defesa do Consumidor, assegura aos seus clientes Garantia Adicional de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da emissão da nota fiscal de compra, contra o desgaste natural e desde que o dispositivo tenha sido utilizado conforme as orientações contidas neste folheto.

To prolong the product usefulness please read and follow the instructions in this leaflet carefully.



Warning for important
operating instructions.

To additional information, please contact our Technical Assistance Department by e-mail or phone.

Opening hours: From Monday to Friday, 8:30 am to 5:30 pm (GMT -03:00)

Phone: + 1 (979) 324 - 6168

E-mail: usa1@wtatech.com

©WTA - Watanabe Tecnologia Aplicada Eireli - EPP - All rights reserved.

PRESENTATION

Congratulations on your choice. You have just purchased a WTA product, company Congratulations on your choice. You have just purchased a WTA product, a brand that adds quality and technology in what it manufactures.

WTA is a Brazilian company specialized in solutions for animal reproduction. Our products are developed for working with cattle, sheep and horses, with recognized approval by the most renowned specialists in the world.

PRODUCTS APPLICATION

The WTA guns are indicated for artificial insemination. They have quick and automatic sheath locking. Made of stainless steel with aluminum finish or AB. Easy to use, disassemble and clean. They provide practicality, safety and hygiene for professional work.

USE

Insert the sheath completely to the end - hear a "click". Before use check that the locking has been successful. Press the trigger to remove the sheath.

CLEANING


Use 70% ethanol or solution with water and neutral detergent for the hygiene of the plastic and metallic components. Do not use boiling water (may cause the rod warp or deform the body of the device).



Polymer remnants of the sheaths may accumulate inside the "body" difficult to lock the sheath. To clean the inside of the device, unscrew the rear section and remove any debris. (be careful not to damage the coil or lose the inner ferrule).

Proceed with the opening only when necessary to prevent premature wear of the threads.

Keep the device horizontal and avoid overlapping of heavy objects to preserve its characteristics.

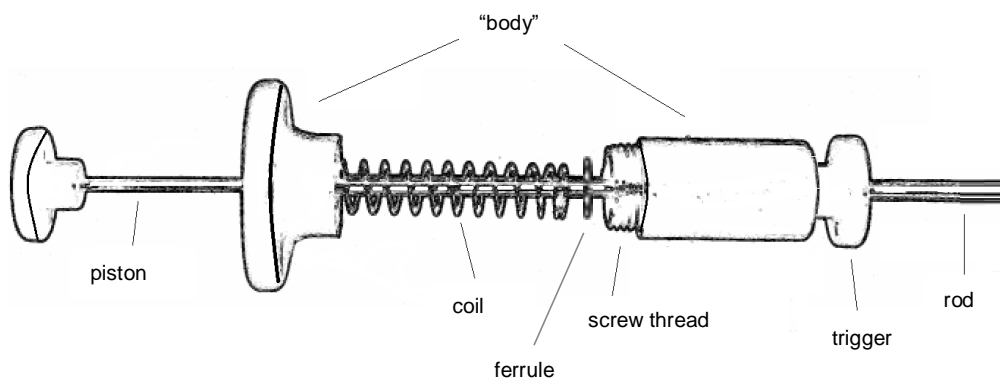

WARRANTY

WTA - Watanabe Applied Technology Eireli - EPP follows strict internal quality control standards in the products manufacture. In addition to the legal guarantee of 90 (ninety) days, provided for in the Consumer Protection Code, it guarantees its customers an additional 90 (ninety) days. Warranty, counted from the date of issue of the purchase invoice, against the usual wear and provided that the device has been used in accordance with the guidelines contained in this leaflet.

Aplicadores – WTA

WTA Guns

Imagens contidas são meramente ilustrativas.

Images contained are merely illustrative.

Todos os direitos reservados | All rights reserved

